


Steriking® Bonded Wrap

Für die hocheffiziente Sterilgutversorgung.

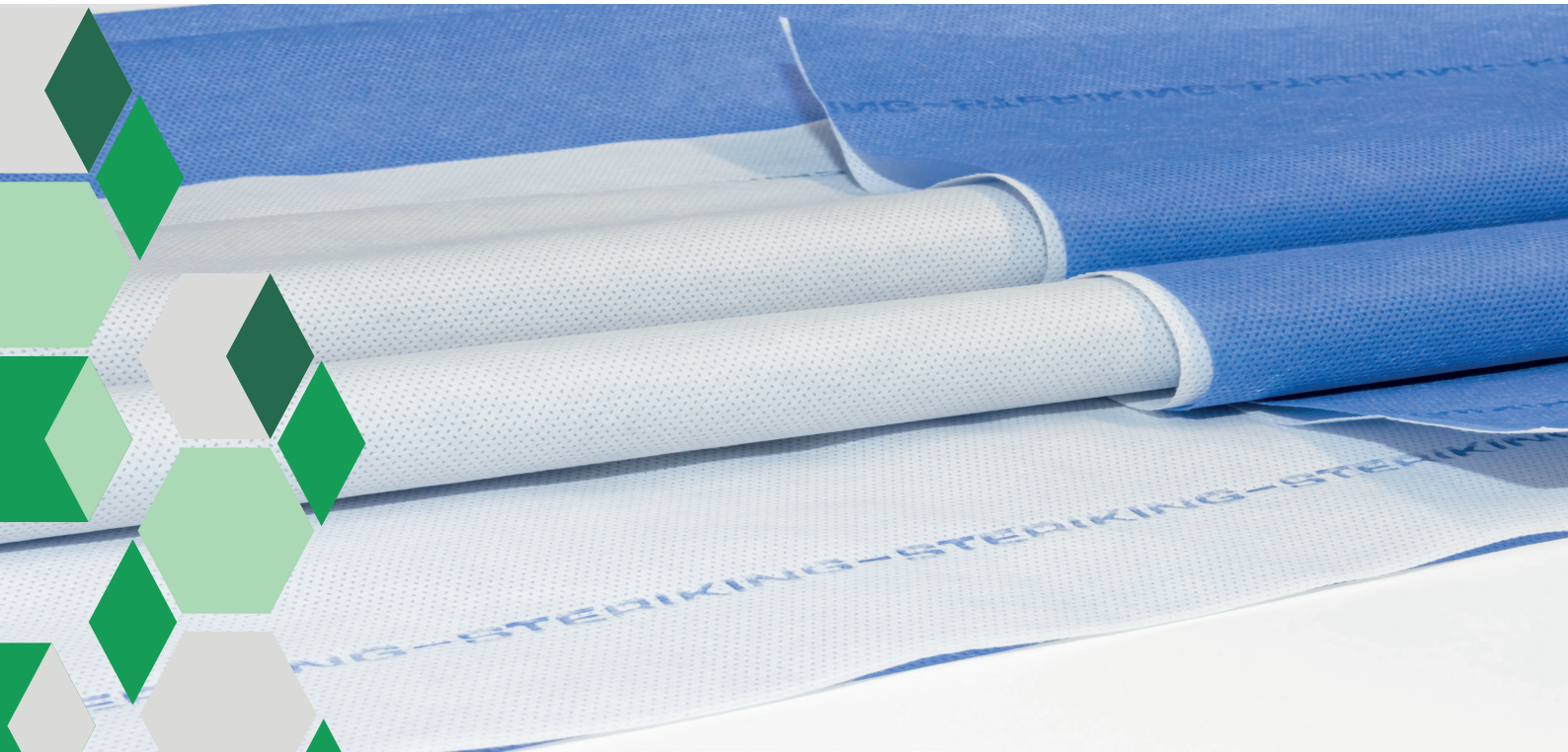


Steriking® Bonded Wraps ist einfach handhabbar, bietet eine unerreichte Festigkeit und steigert die Betriebseffizienz in Gesundheitseinrichtungen.

Steriking® Bonded Wrap




Steriking® Bonded Wrap-Produkte bestehen aus einem Verbund blauer und weißer Einschlagtücher. Die Steriking® Bonded Wrap-Reihe wurde zur Erfüllung vielfältiger Anforderungen in medizinischen Einrichtungen konzipiert und umfasst verschiedene Materialkombinationen, -stärken und -größen für die Verpackung von Instrumenten, Sets und Instrumentenschalen. Verpackungskosten sind im Licht der Leistung zu betrachten. Steriking® Bonded Wrap gewährleistet die Sicherheit der Patienten, senkt Kosten und minimiert das Risiko von Infektionen und verlängerten Krankenhausaufenthalten.

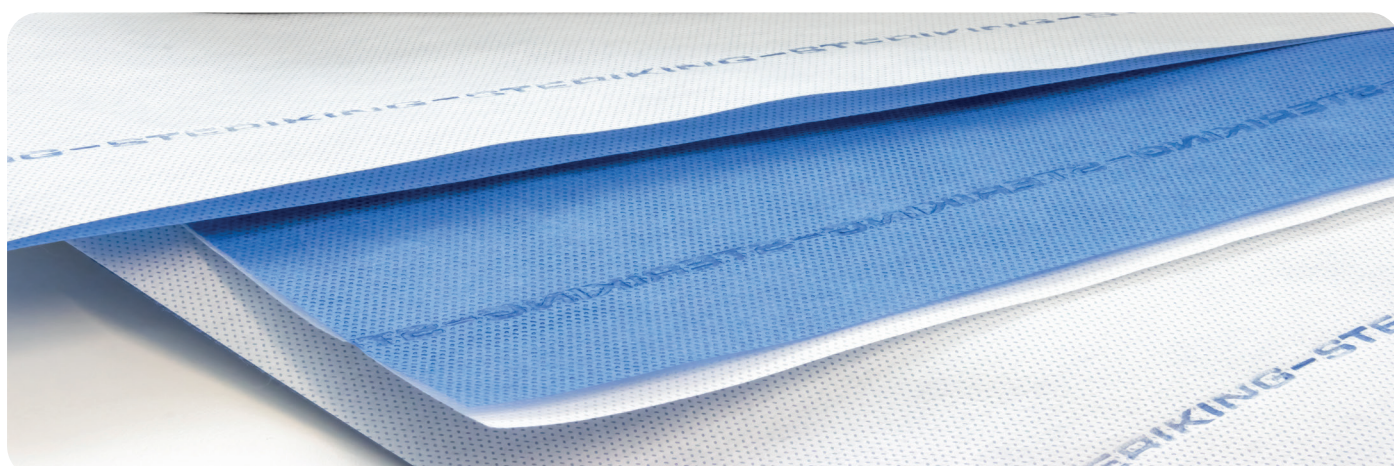

Hervorragende Beständigkeit und erstklassiger Schutz

- Fünf Schichten (SSMMS) gewährleisten überlegene Durchstoß-, Reiß- und Abriebfestigkeit.
- Antistatische Eigenschaften schützen die Nutzer vor elektrostatischer Entladung.
- Fusselarmes Material verhindert eine Kontamination durch Partikel.

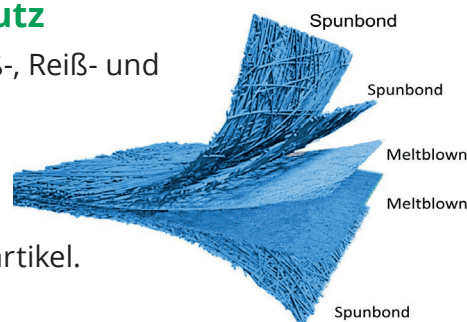

Optimale Weichheit und Drapierbarkeit

- Optimale Weichheit und ein minimales Faltungsgedächtnis sorgen für einen hohen Nutzerkomfort. Das Material lässt sich leicht drapieren, falten und handhaben.

Geeignet für alle Sterilisationsverfahren

- Die nachgewiesene Eignung für die Dampf-, EO-, FO- und VH₂O₂-Sterilisation vereinfacht die Auswahl und senkt das Fehlerrisiko hinsichtlich ungeeigneter Materialien.
- Weniger Materialkombinationen erforderlich.

Material	STEAM	EO	FO	H ₂ O ₂
Steriking® BW	✓	✓	✓	✓

Steriking® Bonded Wrap




Effiziente Sterilisation und überlegene Keimschutzbarriere

- Bonded Wrap-Materialzusammensetzungen werden gemäß den relevanten Industrienormen sorgfältig auf Sterilisationsmittel-Durchtritt, Keimschutzbarriere und bakterielle Filtrationseffizienz (BFE) getestet. Eine zuverlässige Keimschutzbarriere ist selbst bei höchster Beanspruchung gewährleistet.


Sicherheit durch praktische Einfärbung

- Beschädigungen wie Risse und Löcher lassen sich an den zweifarbigen ultraschallverschweißten Verbundschichten leicht erkennen.
- Auf der weißen Farbe treten eventuelle Verunreinigungen deutlich in Erscheinung.

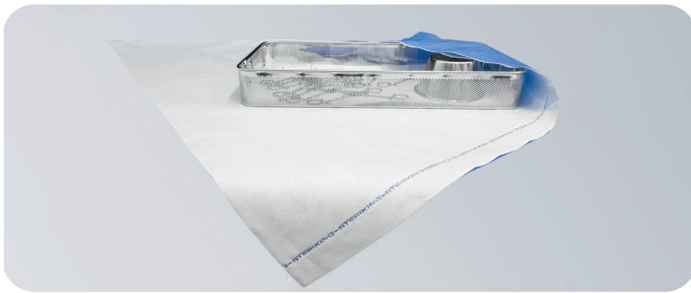

Arbeitseffizienz

- Die Arbeit mit Bonded Wrap in der ZSVA und die aseptische Bereitstellung gehen schneller vonstatten.
- Das Einschlagen mit Steriking® Bonded Wrap erfordert nur halb so viel Zeit wie das Verfahren mit zwei Lagen.
- Gleiches gilt für das Öffnen der Packungen.

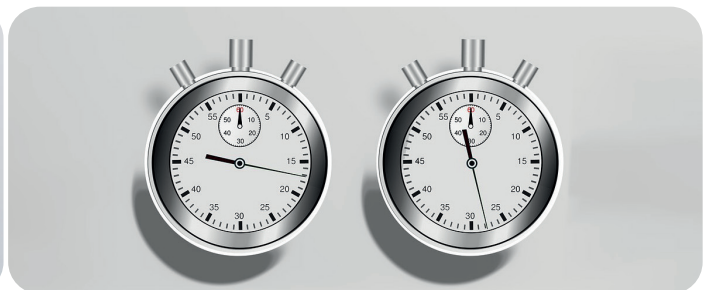


Recyclingfähig

- Bonded Wrap besteht zu 100 % aus Polypropylen, kann dem Kunststoffrecycling zugeführt werden und leistet so einen Beitrag zur nachhaltigen Praxis.




Steriking® Bonded Wrap

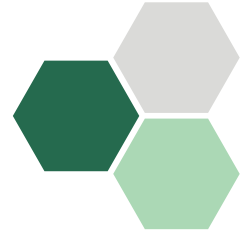

Sortiment

STERIKING® BONDED WRAP 1 (SMX 37 g/m² blau + SMX 47 g/m² weiß)

Produktcode	Größe (cm)	Stck./Karton
BW1060	60 x 60	288
BW1075	75 x 75	104
BW1090	90 x 90	104
BW1100	100 x 100	88
BW1120	120 x 120	72
BW1140	140 X 140	64

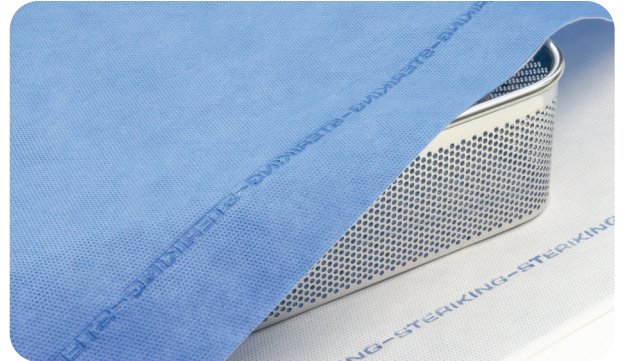


STERIKING® BONDED WRAP 2 (SMX 47 g/m² blau + SMX 47 g/m² weiß)

Produktcode	Größe (cm)	Stck./Karton
BW2060	60 x 60	256
BW2075	75 x 75	96
BW2090	90 x 90	96
BW2100	100 x 100	88
BW2120	120 x 120	64
BW2140	140 x 140	56



STERIKING® BONDED WRAP 4 (SMX 75 g/m² blau + SMX 47 g/m² weiß)

Produktcode	Größe (cm)	Stck./Karton
BW4060	60 x 60	208
BW4075	75 x 75	80
BW4090	90 x 90	80
BW4100	100 x 100	72
BW4120	120 x 120	56
BW4140	140 x 140	48

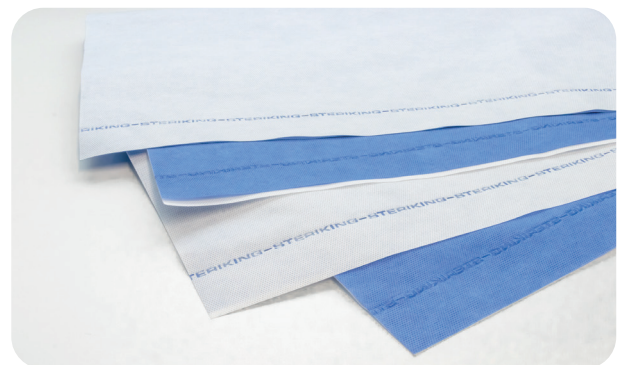

Wipak Oy
Wipaktie 2
FI-15560 Nastola



We care that you pack safely!
www.steriking.com e-mail: steriking@wipak.com