


STERIKING®

W | WICARE

Steriking® Bonded Wrap

Para unidades de procesamiento estériles de alto rendimiento.

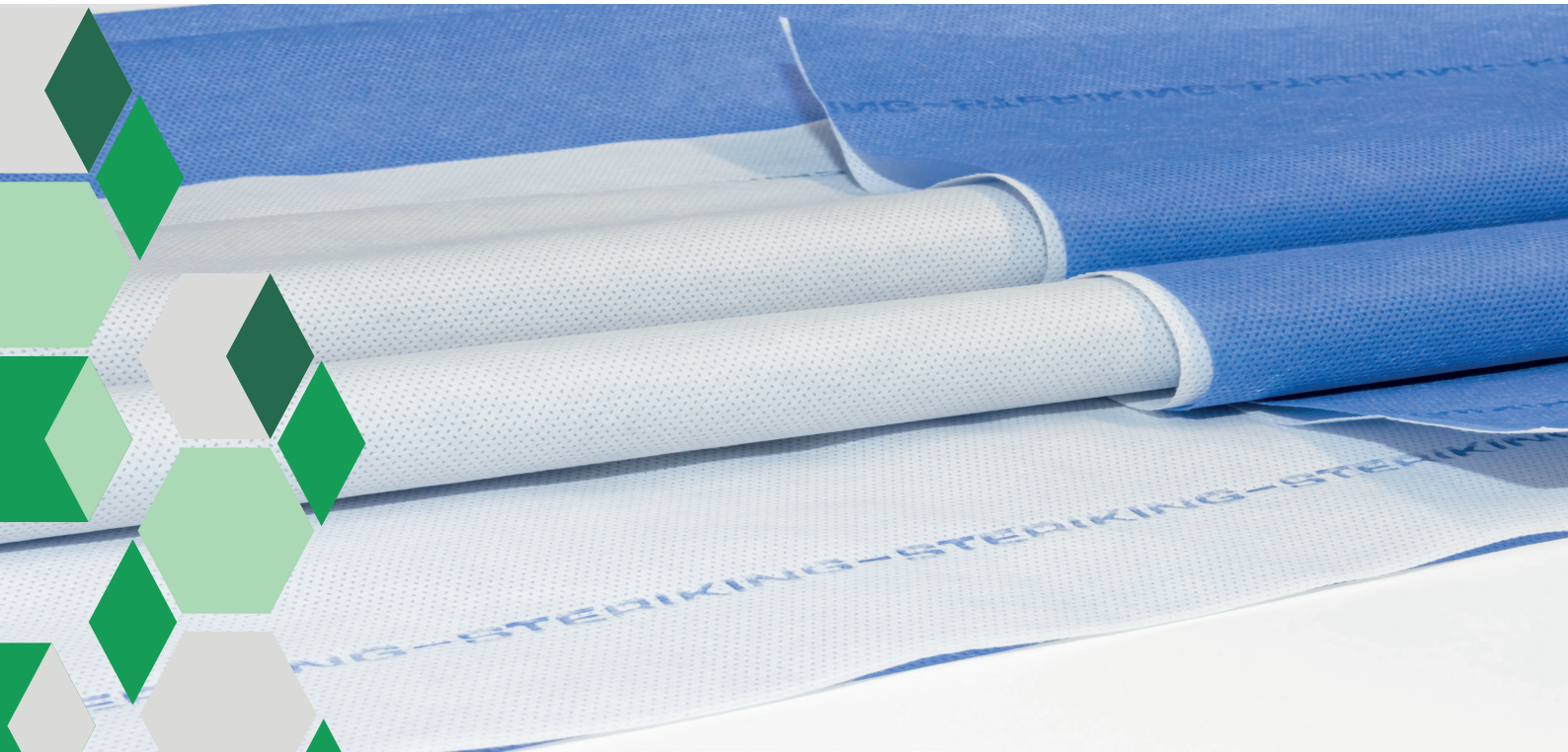


Los productos Steriking® Bonded Wrap proporcionan la comodidad de un fácil manejo combinado con una resistencia inigualable, mejorando la eficiencia operativa en entornos sanitarios.

CE MD

Steriking® Bonded Wrap




Los productos Steriking® Bonded Wrap están elaborados a partir de láminas azules y blancas que están unidas entre sí. Diseñada para satisfacer diversas necesidades en instalaciones sanitarias, la gama de envolturas Steriking® Bonded Wrap ofrece varias combinaciones de materiales, espesores y tamaños para envasar instrumentos, juegos o bandejas de instrumentos. El costo del envase depende de su rendimiento. Con Steriking® Bonded Wrap es posible garantizar la seguridad del paciente, minimizar los costes y minimizar el riesgo de infecciones y estancias hospitalarias prolongadas.

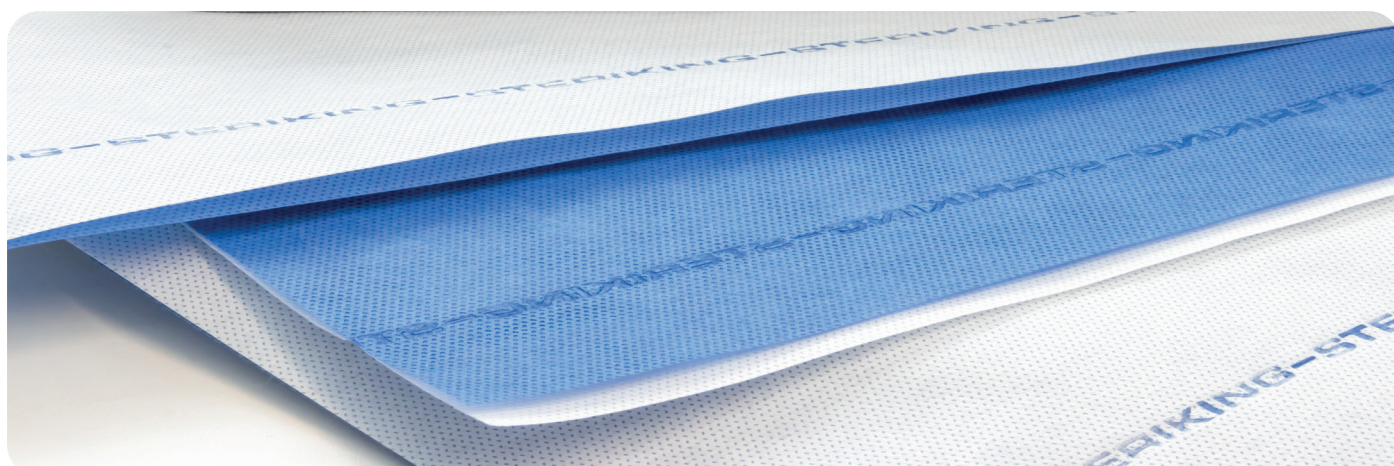

Durabilidad y protección excepcionales

- La estructura de cinco capas (SSMMS) ofrece una resistencia superior contra pinchazos, desgarros y abrasiones.
- Las propiedades antiestáticas protegen a los usuarios de posibles descargas estáticas.
- El material bajo en pelusa evita la contaminación por partículas

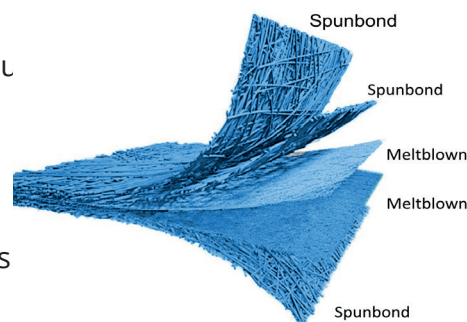

Suavidad y drapeabilidad óptimas

- Diseñada pensando en la comodidad del usuario, la envoltura laminada Steriking® es suave para los dedos, con muy poca memoria de plegado. Fácil de colocar, doblar y desplegar.

Compatible con todos los métodos de esterilización

- Apto para procesos de esterilización con VAPOR, EO, FO y VH₂O₂, lo que garantiza una selección sin complicaciones y reduce el riesgo de errores de compatibilidad de materiales.
- Reduce el número de combinaciones de materiales necesarias.

Material	STEAM	EO	FO	H ₂ O ₂
Steriking® BW	✓	✓	✓	✓

Steriking® Bonded Wrap




Esterilización eficiente, barrera microbiana superior

- Las composiciones de los materiales de la envoltura laminada se prueban rigurosamente en cuanto a penetración de esterilizantes, propiedades de barrera microbiana y eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de acuerdo con los estándares de la industria. Garantiza una barrera microbiana confiable incluso en las situaciones más exigentes.


Colores para seguridad y comodidad

- Las láminas unidas de color azul y blanco, selladas con una técnica de sellado ultrasónico, permiten una fácil identificación de cualquier desgarro, agujero o daño en la envoltura.
- El color blanco resalta eficazmente las posibles impurezas.

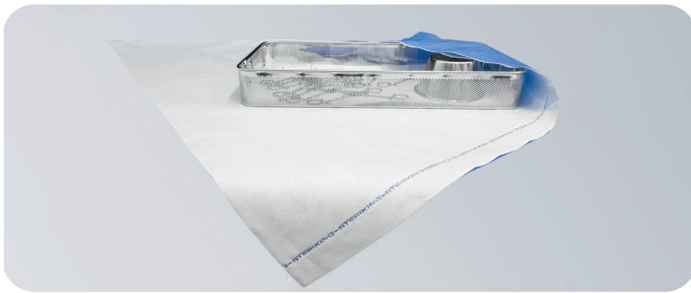

Eficiencia en su esencia

- La envoltura laminada Bonded Wrap reduce el tiempo de trabajo y ahorra tiempo durante la presentación aséptica.
- Envolver con Steriking® Bonded Wrap lleva solo la mitad de tiempo en comparación con el método tradicional de dos capas.
- Abrir el paquete requiere solo la mitad de tiempo que con el método de dos capas.

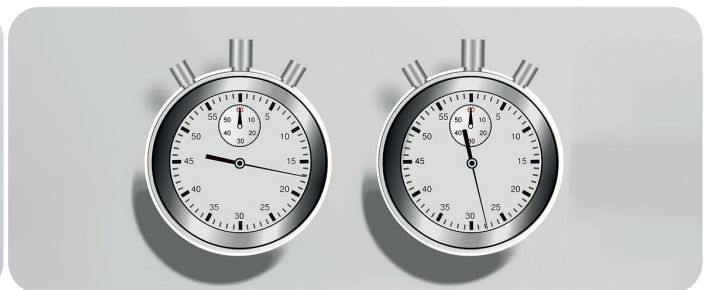

Listo para reciclar

- Hecho de polipropileno 100 % puro, nuestro material permite el reciclaje en flujos de plástico, contribuyendo a las prácticas sostenibles.



Steriking® Bonded Wrap



Gama disponible

STERIKING® BONDED WRAP 1 (SMX 37 g/m² azul + SMX 47 g/m² blanco)

Código de producto	Tamaño (cm)	Pzas. por caja
BW1060	60 x 60	288
BW1075	75 x 75	104
BW1090	90 x 90	104
BW1100	100 x 100	88
BW1120	120 x 120	72
BW1140	140 X 140	64




STERIKING® BONDED WRAP 2 (SMX 47 g/m² azul + SMX 47 g/m² blanco)

Código de producto	Tamaño (cm)	Pzas. por caja
BW2060	60 x 60	256
BW2075	75 x 75	96
BW2090	90 x 90	96
BW2100	100 x 100	88
BW2120	120 x 120	64
BW2140	140 x 140	56



STERIKING® BONDED WRAP 4 (SMX 75 g/m² azul + SMX 47 g/m² blanco)

Código de producto	Tamaño (cm)	Pzas. por caja
BW4060	60 x 60	208
BW4075	75 x 75	80
BW4090	90 x 90	80
BW4100	100 x 100	72
BW4120	120 x 120	56
BW4140	140 x 140	48

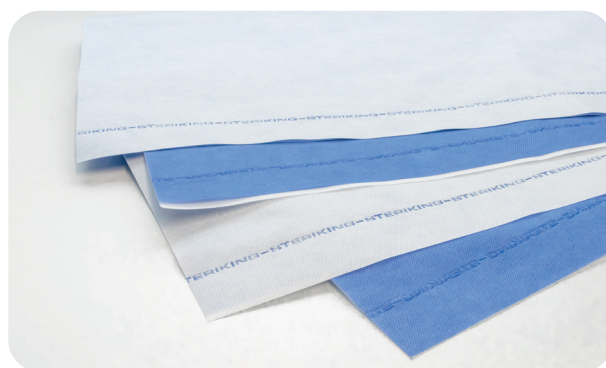

Wipak Oy
Wipaktie 2
FI-15560 Nastola



We care that you pack safely!
www.steriking.com e-mail: steriking@wipak.com